

Regulaator MediSelect®. Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus Uuel meditsiiniliste gaaside kõrgsurvegulaatorite põlvkonnal on mitmeid kombineerimisvõimalusi nii sisend- kui ka väljundliitmikele. See pakub mitmesuguseid võimalusi kõigile meditsiinilistele rakendustele, vastsündinute hooldusest kuni elustamiseni. Uued kõrgsurvegulaatorid on saadaval kahes põhikonfiguratsioonis, MediSelect® ja MediReg® (vt MediReg® regulaatori eraldi tootelehte).

Omadused


- Vooluregulaatoriga rõhuregulaator
- 360° pööratav manomeeter – parim nähtavus
- Uuenduslik fikseeruv reguleerimisnupp lihtsaks ja täpseks seadistamiseks
- Pidev vool, isegi kui reguleerimisnupp jääb kahe asendi vahele
- Vooluskaala seadistatud väärtust saab vaadata nii küljelt kui eest
- Traditsioonilisele 15 l/min variandile lisatud vooluhulga sätted võimaldavad seadet kasutada elustamisel 25 l/min ja täiendav 7 l/min on ette nähtud nebuliseerimiseks
- Väljund on 360° pööratav – ohutusseadistus, mis võimaldab ninakanüüli või hapnikumaski patsiendi poole paremini suunata (kaitstud keerdumineku eest)
- Ergonoomiline ehitus ja kvaliteetne nikeldatud välispind teevad seadme kasutajasõbralikuks ja lihtsalt puhastatavaks

Tehnilised andmed

Sisend/väljundrõhk	Kuni 200 bar / 4,5 bar (450 kPa)
Vooluvahemik*	0-2 l/min (0-0,1-0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-1-1,5-2) 0-6 l/min (0-0,25-0,5-0,75-1-1,5-2-2,5-3-4-5-6) 0-25 l/min (0-1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-25)
Sisend/väljundliitmik	Vastavalt standardile / G3/8"
Materjal	Ballooniliitmik, regulaatori korpus ja vooluhulga regulaator: Matt nikeldatud messing
Reguleerimisnupp	Polüamiid
Mõõdud / kaal	Läbimõõt: 37 mm Pikkus: 91 mm (ilma ballooniliitmikuta) Mass: 860 g
Standardid	Vastab meditsiiniseadmete direktiivile 93/42/EMÜ klass IIB. Vastab standardi EN 10524-1 (Meditsiiniliste gaaside rõhuregulaatorid) ja EN 1789:2000 (Meditsiinilised transpordivahendid ja nende varustus: kiirabiautod) nõuetele.

* Voolutasemed 23 °C ja 101,3 kPa juures

Voolukõver (P2=4,5 bar)

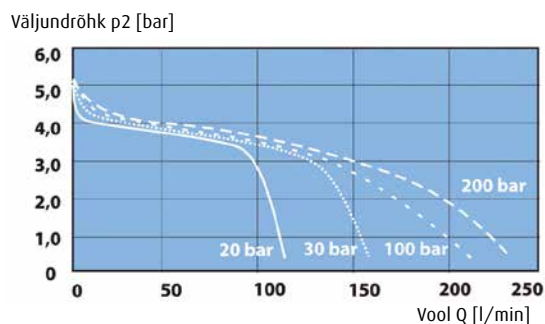

Tootekoodid

MediSelect®

Tootekood	Nimetus	P2	Gaas	VM	Vooliku-nippel	Kiirühendus	Ballooniliitmik Pikkus	Sisend-liitmik
321620	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Jah, SS	W 21,8/55 mm	PIN-indeks
321400	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-2	Jah	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimumter
321610	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-6	Jah	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimumter
321401	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Ei	W 21,8/35 mm***	Käsimumter
321611	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-6	Jah	Ei	W 21,8/55 mm	Käsimumter
321402	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Ei	W 21,8/55 mm	Käsimumter
321406	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Ei	PIN-indeks	PIN-indeks
322944	MediSelect® II	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Jah, DIN	W 21,8/55 mm	Käsimumter
321621	MediSelect® II +imuejektor	4,5**	O ₂	0-25	Jah	Jah, SS	W 21,8/55 mm	Käsimumter

G3/8 = Sirge 3/8" keermestatud

P2 = Reguleeritav rõhk, väljund

VM = Voolumõõdik, liitrit minutis

O₂ = Meditsiiniline hapnik

N₂O = Meditsiiniline dilämmastikoksiid

CO₂ = Meditsiinitehniline süsinikdioksiid

O₂+N₂O = MEDIMIX®

SS = Rootsi standardile vastav kiirühendus

DIN = Saksa standardile vastav kiirühendus

** Vastavalt standardile EN 10524-1

*** Lühike tihend, ei saa kasutada niisutuspuudelite ega üle 10 l gaasiballoonidega.

Kulutarvikud

Tootekood	Nimetus
329533	O-rõngas EPDM sisendliitmikule, meditsiiniline hapnik ja õhk, enne 24.09.2010, 10 tk
332021	O-rõngas EPDM sisendliitmikule, meditsiiniline hapnik ja õhk, pärast 24.09.2010, 10 tk
329538	O-rõngas sisendliitmikule, meditsiiniline dilämmastikoksiid, 10 tk
329534	O-rõngas sisendliitmikule, meditsiinitehniline süsinikdioksiid, 10 tk
329536	Seib 1 PIN-indeksi sisendile, kõik gaasid, 10 tk

Varuosad

Tootekood	Nimetus
301388	Voolikuliitmik 4-6 mm, G 3/8"

Lisavarustus

Tootekood	Nimetus
330386	Niisutuspuudel MediWet, G 3/8"
302851	Adapter G3/8", väljund UNF 9/16" - muude niisutuspuudelite ühendamiseks

AS Linde Gas

Linde Healthcare, Pärnu mnt. 141, 11314 Tallinn

Telefon 650 4504, Faks 650 4501, www.linde-healthcare.ee

MEDIMIX® on The Linde Group'i kaubamärk