

Sulgeventiilid meditsiinilistele gaasidele.

Toote kirjeldus.



Toote kirjeldus

Turvalisuse huvides ja hoolduse lihtsustamiseks on gaasivarustussüsteemid jagatud sektionideks. Sulgeventiilid asuvad kõigis põhi-, tüvi- ja haruahelates.

- Sulgeventiilid kõigile meditsiinilistele gaasidele, sh instrumendiõhule, lämmastikule ja argoonile. Ventiiidid on kuulventiilid, millel on sirge silindriline läbiv ava.
- Kiirelt sulguvad, lihtne käsitseda, kuna ventiili käepide liigub 90°.
- Võimalik lukustada nii avatud kui ka suletud asendisse.
- Ventiilid on hooldusvabad ega nõua teenindamist, vajadusel vahetatakse kogu kuulventiil uue vastu.
- Joodetud liidesed umbmutrite ja lametihenditega. (Tellitakse eraldi tootekoodidega.)
- Töökindlad.
- Lihtne paigaldada ja vahetada.
- Ventiilid on õlivabad ja puhastatud.
- Iga ventiili ja gaasitüübiga antakse kaasa rootsi-, norra-, taani-, soome- ja ungarikeelsed sildid.
- Enne tarnimist testitakse igat ventiili eraldi.
- Kuul on tihendatud PTFE-tihendiga. Spindel on tihendatud O-rõngaste ja teflontihenditega. Ventiili korpuse pooled on tihendatud EPDM-ist O-rõngaga.

Tehnilised andmed


Ventiili korpuse materjal	Nikeldatud messing
Kuuli materjal	Nikeldatud messing
Spindli materjal	Nikeldatud messing
Maks. töö rõhk	33 bar
Lekkekindel	kuni 50 bar
Surveklass	PN40
Ühilduvus-deklaratsioon	Toode vastab meditsiinitehnika direktiivile 93/42/EMÜ. Kooskõlas standardiga EN ISO 7396-1 (Meditsiinilise gaasi torusüsteemid)
Klassifikatsioon	Klass IIa
CE-märgistus	CE 0434

Ringlussevõtt

Toode tuleb ringlusesse võtta vastavalt kohalikele määrustele.

Sulgeventiilid tarnitakse koos kahe tihendiga. Täiskomplekti saamiseks tellige sobivad ühendusdetailid vastavalt alltoodud teabele. Koos ventiilidega tarnitakse ka sildid. Teatud liitmikega, mis on tähistatud *-märgiga, sobivad kaks toruläbimõõtu, mis joodetakse kas ühendustoru sise- või välisküljele.

Tootekoodid

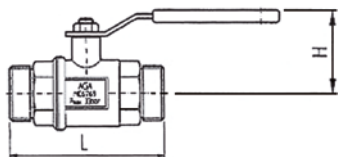

Sulgeventiil kahe tihendiga

Tootekood	Ventiil	Keermestatud liides	Pikkus L (mm)	Kõrgus H (mm)
301447	DN 10	ISO-G 1/2"	67	46
301436	DN 15	ISO-G 3/4"	77	48
331430	DN 20	ISO-G 1	100	52
301437	DN 25	ISO-G 1 1/4"	115	54
302266	DN 32	ISO-G 1 1/2"	132	72
302271	DN 40	ISO-G 2	145	84

Ühendusdetailid (2 mutrit ja 2 liitmikku)

Tootekood	Ventiil	Materjal	Toru mõõt/ühendus sees/väljas tähistatud kui *)
302275	DN 10	Punane messing	10/15*
302274	DN 10	Punane messing	12
302277	DN 15	Punane messing	15/22*
302276	DN 15	Punane messing	18
331420	DN 20	Punane messing	22/28*
302273	DN 25	Punane messing	22/35*
302270	DN 25	Punane messing	28
302267	DN 32	Punane messing	35/42*
302269	DN 40	Punane messing	42
302272	DN 50 CONE	Punane messing	48/54**

** Tellige DN 40 ja DN 50 ühendamiseks Ø54 mm toruga.

Varuosad

Tootekood	Ventiil	Nimetus
301521	DN 10, 15, 25, 32, 40	Sildid
307723	DN 10	Tihend PTFE, 10 tk
301758	DN 15	Tihend PTFE, 1 tk
332026	DN 20	Tihend vask, 1 tk
301757	DN 25	Tihend PTFE, 10 tk
301657	DN 32	O-rõngas EPDM, 5 tk
309709	DN 40	O-rõngas EPDM, 1 tk

Lisateavet meist ja meie toodetest ja teenustest leiate aadressilt www.linde-healthcare.ee.